

# KOMPRESNÍ NÁVLEKY

NÁVOD K POUŽITÍ

CARE&MOVE - KOMPRESNÍ  
NÁVLEKY KB-9890K

# VAROVÁNÍ


- Nerozepínejte manžety, pokud je přístroj zapnutý.
- Před rozeznutím vypněte napájení přístroje.
- Chraňte ovládací panel před vlhkem a vodou.
- Ujistěte se, že se ovládací panel nachází na pevné rovné podložce.
- Během používání přístroje nehýbejte manžetami.
- Zařízení nemůže být opravováno a udržováno během používání.
- Použití konzultujte se svým lékařem. Produkt není určen k diagnóze a léčbě onemocnění.
- Kontraindikace zahrnují (ale nejsou omezeny na): akutní zánětlivá kožní onemocnění, arytmie, erysipel, hluboká tromboflebitida, plicní klizma, akutní žilní trombóza, labilní hypertenze, pacienti s kardiostimulátorem
- V případě viditelného poškození zařízení nepoužívejte ani neopravujte! Opravu zařízení konzultujte s prodejcem zařízení. V případě pochybností ohledně poškození zařízení jej nepoužívejte a kontaktujte svého prodejce.
- Zařízení používejte pouze v souladu s jeho určením tak, jak je uvedeno v tomto návodu k použití.
- Zařízení smí být připojeno pouze k síťovému napětí, jehož hodnota je uvedena na výrobním štítku.
- Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Chraňte zařízení před vlhkem, vodou a ohněm.
- Hrozí nebezpečí poranění, zásahu elektrickým proudem, požárem nebo poškození zařízení.






# UPOZORNĚNÍ

## SCHÉMA ZAPOJENÍ

### • Schéma připojení

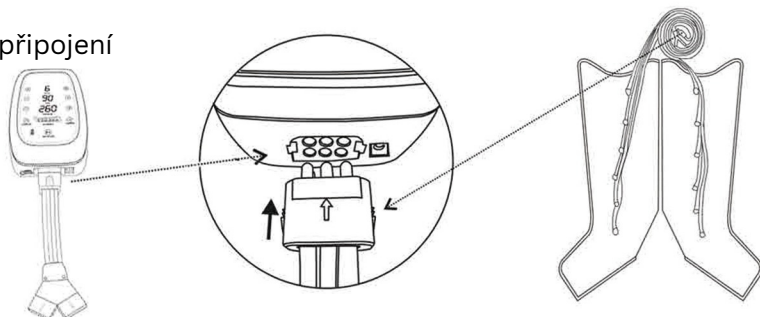

- Po použití, při skladování pumpy, opatrně vypojte hadici z pumpy zmáčknutím klipů na obou stranách přípojky hadice, abyste zamezili poškození přípojky.
- Vyhněte se častému odpojování hadic z návleků a odpojujte je pouze v případě optimalizace prostoru pro skladování. Vyhněte se tak riziku poškození pinů a hadic.

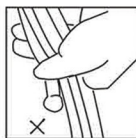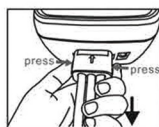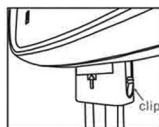

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA


- Před čištěním vypněte ovládací panel.
- Neomývejte přístroj ani manžety tekutinou.
- Zařízení otřete suchým či vlhkým hadříkem.
- Skladujte v suchém a čistém prostoru.
- Chraňte před přímým svitem a teplem.




# PŘÍSLUŠENSTVÍ



1

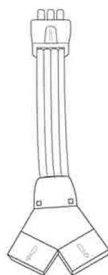


2

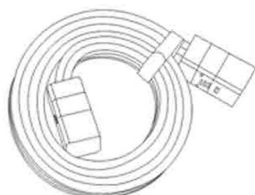

3



4

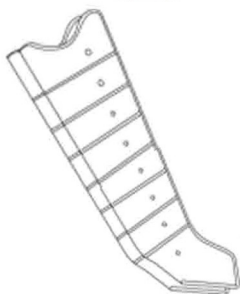

5



6

1 Ovládací panel 1 ks

2 Přípojka 1 ks


3 Hadice 2 ks

4 Síťová nabíječka 1 ks

5 Manžety na nohy 2 ks

6 Kufr k přenášení 1 ks

# LED DOTYKOVÝ OVLÁDACÍ PANEL

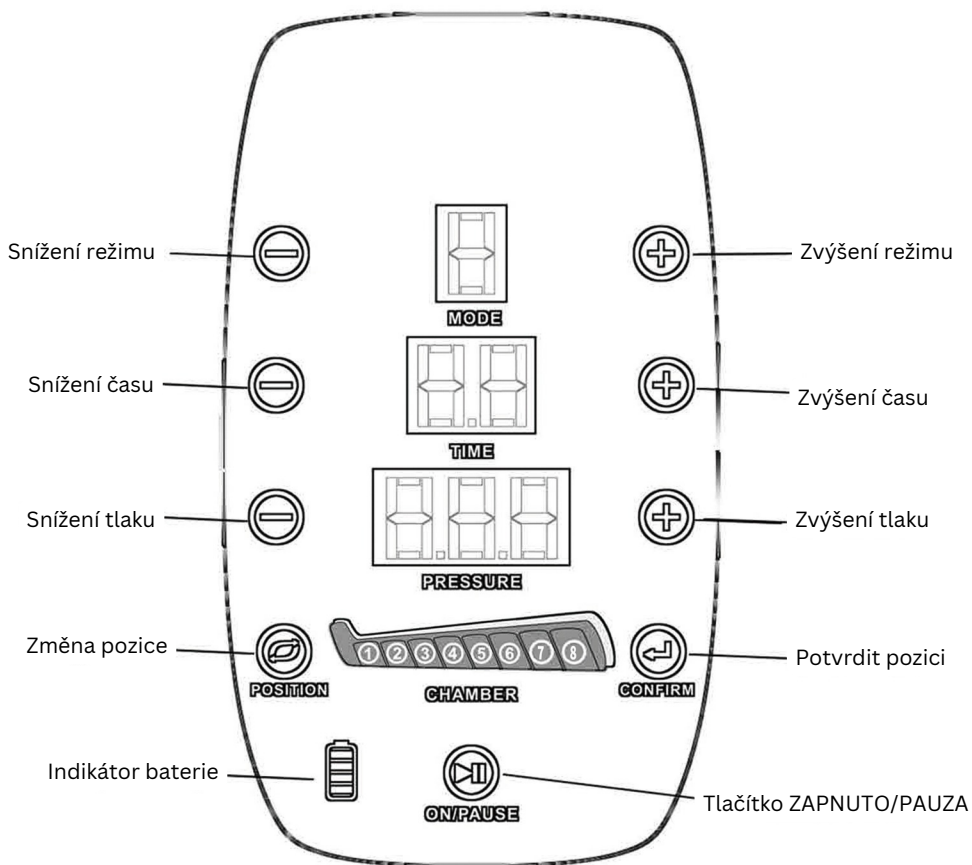

# NASAZENÍ NÁVLEKŮ



Napájení  
220-240V  
nebo 110-120V




hadice s  
konektorem pro  
připojení  
zařízení

Pozn. Zařízení zapněte před připojením manžet.


# RYCHLÝ PRŮVODCE SPUŠTĚNÍM


## PŘED POUŽITÍM

Zkontrolujte prosím nabití baterie stisknutím tlačítka ZAPNUTO . Pokud se čerpadlo nespustí, je vybitá baterie a je třeba ji nabít pomocí nabíječky. Kontrolka na adaptéru se rozsvítí červenou barvou. Během nabíjení se kontrolka změní na zelenou a po úplném nabití se indikátor baterie zobrazí jako plný. 





- 1 Pevně připojte vzduchovou hadici k manžetám.
- 2 Pevně připojte hlavní zástrčku vzduchové hadice k ovládacímu panelu.
- 3 Pohodlně si nasadte manžety.
- 4 Stisknutím tlačítka napájení přepněte čerpadlo do stand by režimu.

Pozn. tlačítko napájení se nachází na přední straně pumpy. Pro vypnutí stiskněte 


- 5 Nastavte požadovaný čas pomocí tlačítek  (10-90 min)


Pozn. Výchozí čas je 30 minut (doporučená doba použití). Pro snížení/navýšení času po 5 minutových intervalech podržte tlačítko. Když čas vyprší, pumpa se automaticky vypne.

- 6 Nastavte požadovanou výšku tlaku tlačítky   (80-260 mmHg)

Pozn. Výchozí tlak je 80 mmHg. Pro snížení/navýšení tlaku podržte tlačítko. Pumpa přestane pracovat při poklesu tlaku pod 80 mmHg.

- 7• Zvolte požadovaný masážní režim stisknutím tlačítka režimu.

Pozn. Výchozí režim je režim 1. Přepnutí režimů je možné pouze pokud je přístroj v režimu pauza. 

- 8• Stisknutím tlačítka  zvolíte komoru. Zvolená komora začne blikat. Stisknutím tlačítka Confirm indikátor komory zhasne a tímto je daná komora vypnutá a nebude nafouknuta.

- 9 Stiskněte tlačítko ON/PAUZA 

Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko start pro zahájení relace.

# ŠEST REŽIMŮ MASÁŽÍ

A



B




C




D



E

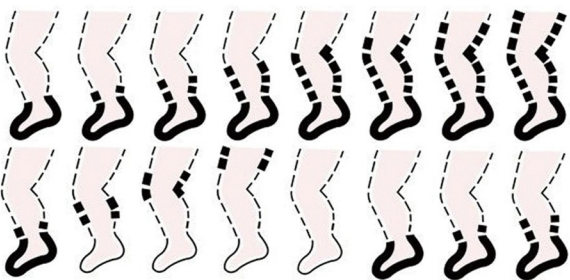

F

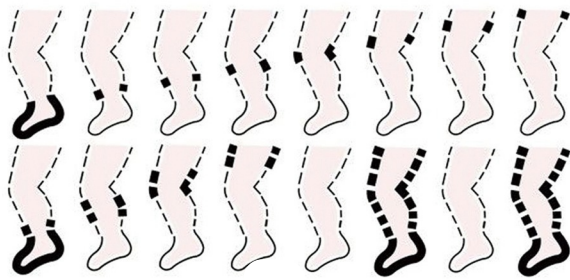




# PO POUŽITÍ

Odpojte hadici od přístroje zatáhnutím za hlavní konec.


Manžety s hadicí uchovávejte v ideálním případě zapojené, před použitím pak pouze připojte druhý konec k přístroji. Časté odpojování hadice od manžet by mohlo způsobit poškození pinu či hadice.

Upozornění: Netahejte za hadici.


Hadici od manžet odpojte zatažením vzhůru za pin.

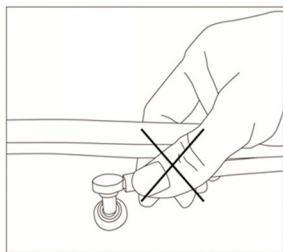

Netahejte za hadici

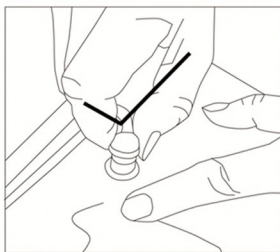

Hadici od manžet odpojte zatažením vzhůru za pin.

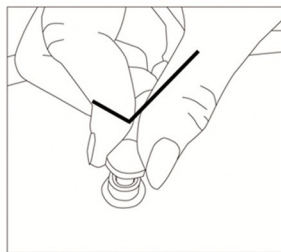

## SKLADOVÁNÍ

- Zařízení uchovávejte nejlépe v originálním balení a na suchém místě.
- Zařízení nepoužívejte nebo neskladujte v místech, kde by bylo vystaveno působení jedovatých par nebo těkavých látek.
- Zabraňte nárazu a pádu předmětů na zařízení.

## **TECHNICKÉ ÚDAJE**

Model: KB-9890K

Hmotnost: 1,6 kg

Rozměry: 21x13x8,9 cm

Spotřeba energie: 49 W

Nabíjecí příkon: AC100v~240V

adapter input: 100-240V AC, 50/60Hz, 1.5A Max

adapter output: DC12,6V; 4A

Napájení: Li Baterie

Kapacita: 5200mAh

### **Likvidace:**

V zájmu ochrany životního prostředí se zařízení po skončení životnosti nesmí vyhazovat do domovního odpadu.

Likvidace se musí provést v souladu s místními předpisy prostřednictvím příslušných sběrných míst.

Ekologická likvidace elektroodpadu je zajištěna prostřednictvím REMA System, a.s..

Sběrná místa elektroodpadu jsou uvedena na stránkách [www.svetfyzioterapie.cz](http://www.svetfyzioterapie.cz)

#### **Dovozce:**

FIXTAPE s.r.o.

IČO: 04054962

Novosady 879/109

594 01 Velké Meziříčí

#### **Výrobce:**

Tianjin Konbest Technology Co., Ltd  
Building H, No.8 of Huatian Road,  
Huayuan Undustry Area, THT, Tianjin,  
China, 300384